

## Rengöra Pumpen

Pumpen ska rengöras regelbundet enligt följande:

1. Dra ur nätsladden och stäng av strömmen före rengöring för att undvika risken för elektriska stötar.
2. Använd en fuktig svamp eller trasa och rengör pumpen med tvål och varmt vatten.
3. Pumpen tål vatten och kan ställas under rinnande varmt vatten för rengöring.
4. Torka pumpen noga med en mjuk trasa innan den används igen.

## ⚠ Varningar

- Sänk inte ned pumpen i vatten.
- Sterilisera inte pumpen i autoklav.
- Använd inte starka rengörings-/desinfektionsmedel och isopropylalkohol eftersom sådana kan skada pumpens hölje.

## Garanti och Reparationer

Underhållsintervall: vart 5:e år.

Service och reparationer får endast utföras av servicecenter som har godkänts av Compat®.

## Larmhantering

Säkerställ alltid lämplig och regelbunden övervakning av sonmatning. När ett larm ljuder:

Steg	Knapp	Funktion
1		Tryck på  för att bekräfta ett larm.
2		Åtgärda varje larm enligt instruktionerna på nästa sida.
3		Tryck på  för att återuppta matningen.

Tel: 020-78 00 20  
Epost: nestehealthscience@se.nestle.com  
Nestlé Health Science  
Box 6026, 102 31 Stockholm

**Compat ella®**

## Larmmeddelanden och Åtgärd


Meddelande	Åtgärd
	Kontrollera att aggregatet är helt fyllt. Om ytterligare påfyllning behövs kan autopåfyllningen upprepas.
	Avsluta administreringen eller programmera en ny nutritionsbehandling. OBS! Om <b>MÅNGA GIVEN VOLYM</b> inte nollställs före varje ny nutritionsbehandling kan larret för avslutad behandling starta för tidigt.
	Starta administreringen på nytt eller stäng av pumpen. Förläng den inaktiva pausen med ytterligare 2 minuter genom att trycka på .
	Stäng pumpluckan.
	Öppna luckan och kontrollera att kassetten och slangen är korrekt isatta.
	Om behållaren med sondnäring är tom, byt ut den och återuppta nutritionsbehandlingen. Se efter om det finns luftbubblor mellan behållaren med sondnäring och pumpen och kontrollera att aggregatet är helt fyllt och korrekt anslutet till behållaren.
	INGET INFLÖDE: Leta efter veck på eller blockeringar i aggregatets slang FÖRE pumpen.
	INGET UTFLODE: Leta efter veck på eller blockeringar i aggregatets slang och sonden EFTER pumpen. Spola igenom sonden om det behövs. Se till att hela slangen är placerad så att sondnäringen kan flöda fritt. Öppna luckan, kontrollera installationen av aggregatet och stäng luckan igen.
	Anslut pumpen till nätströmmen med pumpens nätadapter. Ladda batteriet.
	Ta bort källan till de magnetiska störningarna eller flytta pumpen till en annan plats.
	Stäng av pumpen och starta om för att ta bort felet. Använd inte pumpen om problemet återkommer eller upprepas. Kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning eller ett servicecenter som godkänts av Nestlé.

**Compat ella®**  
Snabbguide



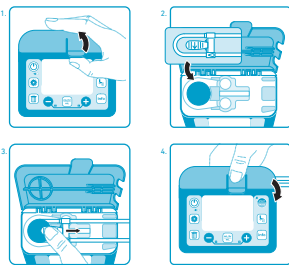
Det här är Compat Ella®

## Snabbguide

- Den här snabbguiden ersätter inte bruksanvisningen, som måste läsas före användning.
- Läs bruksanvisningen som medföljer pumpen. En bruksanvisning i pdf-format kan också laddas ned från [www.compat.com](http://www.compat.com)
- Ej för intravenös användning. Endast avsedd för enteral användning.
- Använd endast kommersiellt tillgängliga sondnärings till patienter som behöver kontinuerlig näringstillförsel och kontrollera sondmatningen regelbundet.
- Interaktiv utbildning finns på: **Compat ella<sup>®</sup>** Training Centre  [www.compatella.com](http://www.compatella.com)

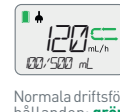

## Förbereda Pumpen och Aggregatet

- Öppna luckan genom att lyfta på tumfliken.
- Linda kassetten ögla runt rotorn. Observera pilen som visar rätt riktning.
- Använd tummen och skjut kassetten åt höger för att fästa den i pumpen.
- Stäng luckan genom att trycka på "PUSH"-symbolen.








 **Varning:** Använd endast Compat Ella<sup>®</sup>-aggregat.

## Färgskärmen - Översikt

				
Programmeringsinformation: <b>svarta</b> tecken	Normala driftförhållanden: <b>gröna</b> ikoner med <b>svarta</b> tecken	Larm: <b>röda</b> tecken och ikoner	Information: <b>blå</b> tecken	Inställningar: <b>gröna</b> tecken

## Knappfunktioner - Översikt



Knapp	Funktion
	Håll intryckt i 2 sekunder för att starta eller stänga av pumpen.
	Tryck för att starta eller pausa en nutritions-behandling eller skjuta upp ett larm.
	Håll intryckt i 2 sekunder för att fylla aggregatet automatiskt.
	Tryck upprepade gånger för att bläddra igenom programmerade värden för flödes hastighet och volym.
	Tryck för att öka / minska värden (håll intryckt: hastigheten ökar). Tryck på båda knapparna samtidigt för att låsa eller låsa upp knappsatsen.
	Tryck en gång för att rensa värdet på skärmen till standardvärdet eller 0. Håll intryckt för att återställa alla parametrar för nutritionsbehandling.
	Tryck upprepade gånger för att bläddra igenom tillförselshistorik. Håll intryckt för att hämta 30-dagars rullande volymhistorik.
	Tryck upprepade gånger för att bläddra igenom pumpinställningar.

## Matning i Kontinuerligt Läge

Steg	Knapp	Funktion
1	 2"	Starta pumpen.
2		Kontrollera <b>MÄNGD GIVEN VOLYM</b>
3		Vid start av en ny nutritionsbehandling, nollställ <b>MÄNGD GIVEN VOLYM</b>
4	 2"	Fyll på aggregatet. Obs! Detta ska göras innan aggregatet kopplas till sonden/gastrostomin.
5		Använd <b>+</b> och <b>-</b> och <b>STÄLL IN FLÖDESHASTIGHET</b> 1-600 mL/h.
6		Använd <b>+</b> och <b>-</b> för att ange volym 1-4000 mL/KONT*.
7		Starta nutritionsbehandlingen.

\* **Kontinuerlig:** Ingen matningsvolym har ställts in. Pumpen kommer att arbeta kontinuerligt tills näringslösningen tar slut.

### Försiktighet

- Säkerställ att aggregatet inte är kopplat till sonden/gastrostomin innan påfyllning av aggregatet.
- Börja och avsluta varje sondmatning med att spola igenom sonden/gastrostomin med vatten.
- Var noga med att nollställa parametern **MÄNGD GIVEN VOLYM** vid start av en ny behandling.
- Verifiera alla behandlingsparametrar innan en ny behandling startas.
- För att radera **ACKUMULERAD VOLYM** tryck två gånger på  och sedan på  för att nollställa värdet.

## Matning i Intervalläge

Se bruksanvisningen för mer information.